

Guide d'utilisation

1

Nettoyez votre visage.

Avant chaque séance, assurez-vous que votre peau est parfaitement propre et sèche.

Appliquez un soin.

Déposez une couche fine de votre produit (sérum, crème, d'huile) pour permettre de glisser sans tirer la peau, tout en favorisant la pénétration des actifs.

Choisissez le mode adapté à vos besoins. Appuyez sur le bouton central avec une pression longue pour allumer l'appareil, puis appuyez de nouveau pour naviguer entre les 3 niveaux :

Niveau 1

Lumière bleue + EMS doux (chaleur 42°C)
Idéal pour les peaux sujettes aux imperfections, aide à purifier et apaiser.

Niveau 2

Lumière verte + EMS moyen (chaleur 42°C)
Cible les irrégularités du teint, aide à unifier et équilibrer.

Niveau 3

Lumière rouge + EMS plus intense (chaleur 42°C)
Stimule la production de collagène, tonifie et lutte contre le relâchement cutané.

2

Le sens du massage : Suivre la lymphe.

Le drainage lymphatique permet la circulation naturelle des fluides sous-cutanés vers les ganglions, situés sous les oreilles et au niveau des clavicules.

Cela permet à la peau de se détoxifier, de désengorger les tissus et de réveiller l'éclat naturel du teint.

Le mouvement doit toujours se faire du centre du visage vers l'extérieur, puis du haut vers le bas, pour accompagner ce flux. Massez lentement, sans pression excessive.

3

La cou pour ouvrir les voies lymphatiques.

Avant de traiter le visage, commencez par préparer la circulation. Le cou : placez l'appareil sous la mâchoire, puis faites-le glisser doucement vers le bas, en direction de la clavicule.

Effectuez ce geste 5 à 10 fois de chaque côté.

Ce mouvement simple libère les canaux lymphatiques et crée un passage naturel pour le drainage à venir.

4

La mâchoire pour redessiner les contours.

Poursuivez ensuite vers la mâchoire, en partant du centre du menton.

Glissez lentement jusqu'au lobe de l'oreille, en suivant la ligne naturelle de l'ovale du visage.

Ce geste active les muscles masséters, souvent contractés par le stress ou la tension.

5

Les joues pour lisser et illuminer.

Débutez au coin des lèvres et remontez vers le haut des pommettes, jusqu'aux tempes.

Les mouvements doux activent la circulation sanguine et lymphatique, réduisant les gonflements tout en oxygénant les tissus.

6

La contour des yeux - Apaiser et décongestionner.

Fermez toujours les yeux avant d'approcher cette zone (voir préventions d'utilisation).

À l'aide de l'extrémité fine de l'appareil, partez du coin interne de l'œil et glissez doucement vers la tempe.

Ce geste, à répéter 5 fois de chaque côté, aide à drainer les poches diminuer les cernes et lisser les ridules.

7

Le front pour lisser les tensions.

Terminez par le front, souvent marqué par les contractions musculaires quotidiennes.

Commencez au-dessus des sourcils et remontez vers la racine des cheveux.

Vous pouvez aussi effectuer des mouvements horizontaux du centre vers les tempes.

8

La finition

Pour clôturer la séance, vous pouvez effectuer à nouveau quelques glissements amples du centre du visage vers les oreilles, puis redescendez vers le cou et les clavicules.

C'est le moment où tout le travail du drainage s'achève : la circulation est relancée, les toxines s'éliminent, et le teint s'illumine naturellement.

Enfin, appliquez votre soin hydratant habituel : la chaleur douce de l'appareil a ouvert les pores, permettant une meilleure absorption des actifs.

9

Nettoyez après l'usage.

L'appareil n'est pas étanche.

Pour préserver ses performances et sa longévité, évitez tout contact direct avec l'eau ou les milieux humides.

Après chaque soin, utilisez simplement un chiffon doux légèrement humide ou un nettoyant doux à base d'alcool pour désinfecter la tête métallique.




La finition

Pour clôturer la séance, vous pouvez effectuer à nouveau quelques glissements amples du centre du visage vers les oreilles, puis redescendez vers le cou et les clavicules.

C'est le moment où tout le travail du drainage s'achève : la circulation est relancée, les toxines s'éliminent, et le teint s'illumine naturellement.

Enfin, appliquez votre soin hydratant habituel : la chaleur douce de l'appareil a ouvert les pores, permettant une meilleure absorption des actifs.

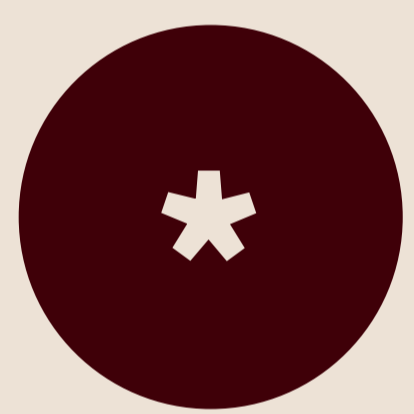

Pour qui est-il fait ?

Notre appareil convient à tous les types de peau, qu'il s'agisse de peaux jeunes en quête d'éclat ou de peaux matures désireuses de retrouver fermeté et tonus.

Il s'adapte à toutes les carnations (voir préventions d'utilisations pour plus de renseignements).

Précautions d'utilisation.

L'utilisation de votre appareil doit se faire en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les consignes suivantes avant votre soin.

Cet appareil n'est pas un dispositif médical. Il ne remplace en aucun cas un traitement dermatologique, médical ou esthétique. En cas de doute ou de condition de santé particulière, consultez toujours un professionnel de santé avant utilisation.

Photosensibilité

En cas de photosensibilité connue (peau réactive à la lumière naturelle ou artificielle), ne pas utiliser l'appareil. Si vous suivez un traitement médical photo sensibilisant, demandez l'avis de votre médecin avant toute utilisation.

État de la peau

Ne pas utiliser sur une peau lésée, irritée, brûlée, ou immédiatement après une intervention chirurgicale, esthétique ou dermatologique (laser, peeling, injection, etc.).

Zone des yeux

Ne jamais diriger la lumière LED directement vers les yeux. Gardez les yeux fermés, surtout lors du soin du contour des yeux. En cas de sensibilité oculaire, portez des lunettes de protection adaptées et demandez conseil à un professionnel de santé.

Fréquence d'utilisation

Utilisation recommandée : 2 à 3 fois par semaine, pour une durée maximale de 5 minutes par séance. Une utilisation excessive n'apporte pas de bénéfices supplémentaires et peut sensibiliser la peau.

Contre-indications médicales

Déconseillé aux femmes enceintes, aux porteurs de pacemaker, aux personnes présentant des troubles cardiaques, neurologiques ou épileptiques, sauf avis médical contraire.

Affections cutanées

En cas de pathologie dermatologique (acné sévère, rosacée, eczéma, psoriasis, vitiligo, etc.), demandez l'avis de votre médecin avant d'utiliser l'appareil. En cas de dépigmentation ou vitiligo, évitez le mode vert (lumière 525 nm).

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants et des animaux. Cet appareil est destiné à un usage cosmétique externe uniquement.

Durée de vie et responsabilité

Cet appareil est conçu pour un usage domestique normal. Toute modification, réparation non autorisée ou usage détourné annule la garantie.

Piercings, implants métalliques et tatouages

Éviter d'utiliser l'appareil sur des zones contenant des piercings, implants ou prothèses métalliques. Ne pas utiliser sur une zone tatouée récemment (moins de 4 semaines).

Utilisation et entretien

Ne pas utiliser l'appareil pendant la charge. En cas de surchauffe, d'odeur inhabituelle ou de dommage visible sur l'appareil, cessez immédiatement l'utilisation. Ne pas immerger dans l'eau ni utiliser sous la douche (appareil non étanche).